

ceramill liquid

Ceramill Liquid Farbkarte zum Einfärben von Ceramill ZI und Ceramill ZOLID

*Ceramill Liquid color chart
for staining Ceramill ZI and Ceramill ZOLID*


*Nuancier Ceramill Liquid
pour la coloration de Ceramill ZI et de Ceramill ZOLID*

*Tabella colori Ceramill Liquid
per la colorazione di Ceramill ZI e Ceramill ZOLID*

*Ficha de colores Ceramill Liquid
para el coloreado de Ceramill ZI y Ceramill ZOLID*



AMANNGIRRBACH

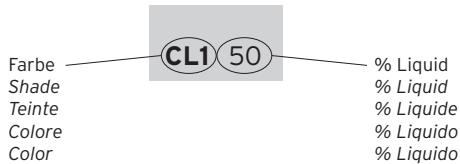

Die Angaben entsprechen dem prozentualen Anteil des Liquid und der Auswahlmöglichkeiten in der Software Ceramill Mind.

Die Vorgehensweise zum Einfärben von anatomisch reduzierten Gerüsten aus Ceramill ZI und Ceramill ZOLID (Tauchttechnik) und vollanatomischen Arbeiten aus Ceramill ZOLID (Pinselftechnik) ist in der Gebrauchsanweisung Ceramill Liquid beschrieben.

Hinweis zu Ceramill ZOLID:

Im Ceramill M-Center werden alle verblendbaren Gerüste in der Grundfarbe, und alle vollanatomischen Arbeiten in abgeschwächter Grundfarbe (40% Grundfarbe/60%dest. Wasser) komplett getaucht.

The specifications made correspond to the percentage share of the liquid and the selection modes offered in the software Ceramill Mind.

The technique for staining anatomically reduced Ceramill ZI and Ceramill ZOLID frameworks (immersion technique) and fully anatomical Ceramill ZOLID restorations (brush technique) is described in the Ceramill Liquid instructions for use.

Information about Ceramill ZOLID:

In the Ceramill M-Center all veneerable frameworks are fully immersed in the base shade and all fully anatomical restorations are fully immersed in diluted base shade (40% base shade/60% distilled water).

Les indications correspondent au pourcentage de la partie de « Liquid » et des possibilités de sélection dans le logiciel Ceramill Mind.

Les instructions sur la coloration des armatures anatomiquement réduites en Ceramill ZI ou Ceramill ZOLID (technique par immersion) et sur les travaux entièrement anatomiques en Ceramill ZOLID (technique du pinceau) figurent dans le mode d'emploi de Ceramill Liquide.

Notes sur Ceramill ZOLID:

Toutes les armatures à recouvrement cosmétique seront immergées complètement dans la teinte de base au centre Ceramill M; tous les travaux entièrement anatomiques seront immergés complètement dans la teinte de base atténuée (40% de teinte de base/60% d'eau distillée).

Le indicazioni corrispondono alla percentuale di Liquid e alle possibilità di scelta nel software Ceramill Mind.

La procedura per la colorazione di strutture di Ceramill ZI anatomicamente ridotte (tecnica dell'immersione) e di lavori di Ceramill ZOLID completamente anatomici (tecnica della pittura), è descritta nelle istruzioni per l'uso di Ceramill Liquid.

Informazione riguardo Ceramill ZOLID:

Nel Ceramill M-Center tutte le strutture da ricoprire con ceramica sono completamente immerse nel colore di base, e tutti i lavori completamente anatomici nel colore di base diluito (40% colore di base/60% acqua distillata).

Las indicaciones corresponden a la parte porcentual del Liquid y a las posibilidades de selección en el programa Ceramill Mind.

El procedimiento para el coloreado de estructuras anatómicamente reducidas de Ceramill ZI y Ceramill ZOLID (técnica de sumersión), así como de trabajos de anatomía completa realizados en Ceramill ZOLID (técnica de pincel) está descrito en las instrucciones de uso del Ceramill Liquid.

Observación respecto a Ceramill ZOLID:

En el Ceramill M-Center se sumergen completamente todas las estructuras recubribles en el color base y todos los trabajos de anatomía completa en el color base diluido (40% de color base/60% agua dest.).

ceramill liquid

für Ceramill ZI | for Ceramill ZI | pour Ceramill ZI | per Ceramill ZI | para Ceramill ZI

Tauchtechnik Dentinfarben Grundfarbe

Immersion technique, dentine shades, base shade | Technique par immersion, teintes de dentine, teintes de base
Tecnica dell'immersione, colori di base per dentina | Técnica de sumersión colores base dentina

CL1 50 Bleachfarbe Bleach shade Teintes Bleach Colore Bleach Color Bleach	CL1 100 A1/B1	CL2 50 A2/B2	CL2 100 A3/A3,5/A4 B3/B4	CL3 50 B2/C1/C2/D2
CL3 100 A3,5/B3/B4 C3/D3	CL4 50 C3/D4	CL4 75 D2	CL4 100 A4/C4/D3	

Intensivfarben (nicht im Ceramill M-Center erhältlich)

Shade modifiers (not available in the Ceramill M-Center) | Teintes intensives (non disponibles au centre Ceramill M) | Colori intensivi (non disponibili nel Ceramill M-Center) | Colores intensivos (no disponibles en el Ceramill M-Center)

CL OR 100 Orange Orange Orange Arancione Naranja	CL OR 50 Orange Orange Orange Arancione Naranja	CL GR 100 Grau Grey Gris Grigio Gris	CL GR 50 Grau Grey Gris Grigio Gris
--	---	--	---

ceramill liquid

für Ceramill Zolid | for Ceramill Zolid | pour Ceramill Zolid | per Ceramill Zolid | para Ceramill Zolid

Tauchtechnik Dentinfarben Grundfarbe

Immersion technique, dentine shades, base shade | Technique par immersion, teintes de dentine, teintes de base
Tecnica dell'immersione, colori di base per dentina | Técnica de sumersión colores base dentina

CL2 50 A1/B2/B1	CL2 100 A2/A3/A3,5/B3/ B4/D3/D4	CL2 100/CL4 100 (80%/20%) A4	CL3 50 C1	CL3 100 C2/C3/C4/D2
---------------------------	--	---	---------------------	-------------------------------

Tauchtechnik Dentinfarben abgeschwächte Grundfarbe (40% Grundfarbe/60% dest. Wasser)

Immersion technique, dentine shades, diluted base shade (40% base shade/60% distilled water) | Technique par immersion, teintes de dentine, teinte de base atténuée (40% de teinte de base/60% d'eau distillée) | Tecnica dell'immersione, colori di base per dentina diluiti (40% colore di base/60% acqua distillata) | Técnica de sumersión colores base dentina diluidos (40% color base/60% agua dest.)

CL2 50 A1/B2/B1	CL2 100 A2/A3/A3,5/B3/ B4/D3/D4	CL2 100/CL4 100 (80%/20%) A4	CL3 50 C1	CL3 100 C2/C3/C4/D2
---------------------------	--	---	---------------------	-------------------------------

Intensivfarben (nicht im Ceramill M-Center erhältlich)

Shade modifiers (not available in the Ceramill M-Center) | Teintes intensives (non disponibles au centre Ceramill M) | Colori intensivi (non disponibili nel Ceramill M-Center) | Colores intensivos (no disponibles en el Ceramill M-Center)

CL OR 100 Orange Orange Orange Arancione Naranja	CL OR 50 Orange Orange Orange Arancione Naranja	CL GR 100 Grau Grey Gris Grigio Gris	CL GR 50 Grau Grey Gris Grigio Gris
--	---	--	---



Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-0
Fax +43 5523 55990

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



AMANNGIRRBACH